

Schaumstoffwundauflagen adhäsiv

aktivmed Schaumstoffwundauflagen wurden speziell für die tägliche Wundversorgung von Patienten entwickelt. Patienten profitieren von den besonderen Produkteigenschaften der aktivmed Schaumstoffwundauflagen, die Exsudat aus dem Wundbett ableiten und ein idealefeuchtes Wundmilieu erzeugen.

aktivmed bietet ein vielfältiges Sortiment aus dreischichtigen, nicht-adhäsiven und adhäsiven Schaumstoffwundauflagen in unterschiedlichen Größen und Formen wie auch einer anatomisch geformten, zweischichtigen Wundauflage für die Ferse.

Schaumstoffwundauflage adhäsiv (mit selbstklebender Wundkontaktschicht und Hafrand)

Die aktivmed Schaumstoffwundauflage mit adhäsiver Wundkontaktschicht und Hafrand ist ein vielfältig einsetzbarer Verband – entwickelt, um mäßig bis stark exsudierenden Wunden Schutz und Saugfähigkeit zu bieten.

Die innovative Konstruktion der Wundauflage besteht aus 3 Schichten: Die keim- und wasserdichte, äußere Schutzschicht, das hochabsorbierende PU-Schaupad und die perforierte Adhäsivschicht bieten höchste Sicherheit.

Die weichen und flexiblen Eigenschaften der aktivmed Schaumstoffwundauflage sorgen dafür, dass sie komfortabel unter der Kleidung der Patienten oder auch unter Kompressionsstrümpfen getragen werden kann.

Die aktivmed Schaumstoffwundauflage adhäsiv reduziert den Schmerz beim Verbandswechsel, da die adhäsive, perforierte Wundkontaktschicht die Wundauflage reißfest macht und dabei nicht anhaftet.

Funktionen

- verbesserter Feuchtigkeitstransport
- besonders reißfest durch leicht klebende, perforierte Wundkontaktschicht
- abgeschrägter Hafrand für mehr Halt – verhindert Verrutschen der Wundauflage
- wasserdicht und bakterienresistent
- weich und komfortabel
- sorgt für ein idealefeuchtes Wundmilieu
- verringert das Risiko einer Mazeration

Produktleistung

An einer chronischen Wunde zu leiden, kann sehr belastend sein. Im Besonderen kann der Umgang mit Wunden, die überschüssiges Sekret absondern sowohl für den Patienten als auch für den Arzt oder das Pflegepersonal sehr unangenehm sein.

aktivmed Schaumstoffwundauflagen wurden eigens für schwer heilende Wunden entwickelt. Sie verfügen über einen weichen Schaumstoffkern, der maximalen Komfort für den Patienten bietet und zugleich den Körper in seinem natürlichen Wundheilungsprozess durch feuchte Wundheilung unterstützt.

Die aktivmed Schaumstoffwundauflage absorbiert das Exsudat in die Struktur des Verbandes, während die atmungsaktive Deckschicht das Exsudat nach außen transportiert. Die Kombination aus hoher Absorptions- und der Abdampftrate (MVTR) des Verbandes garantieren, dass das Exsudat effektiv abgeleitet wird und das Risiko des Aufweichens der Wunde reduziert wird.

Die Absorptionsfähigkeit

Zunächst wird das Exsudat rasch und vertikal in den wasserbindenden Schaumstoffkern absorbiert. Die mikroporige Wundkontaktschicht hilft dabei, die Anhaftung an das Wundbett zu verhindern und das Verletzungsrisiko für den Patienten während des Verbandswechsels zu minimieren. Die atmungsaktive Folienoberfläche der Wundauflage wurde entwickelt, um eine hohe Abdampftrate zu gewährleisten.

Die Abdampftrate


Die Abdampftrate beschreibt den Anteil an Feuchtigkeit, der durch die Wundauflage nach außen transportiert wird und ist somit ein Maß für die Atmungsaktivität der Wundauflage.

Die starke Abdampftrate der Oberflächenfolie der aktivmed Schaumstoffwundauflage und ihre hohe Absorptionsfähigkeit unterstützen die Ableitung des überschüssigen Exsudats aus der Wunde und sorgen somit für einen hochgradigen Feuchtigkeitstransport.

Indikationen

Die aktivmed Schaumstoffwundauflagen sind anzuwenden bei mäßig bis stark exsudierenden Wunden in der Exsudations- und Granulationsphase oder auch bei verschorfenden Wunden, wie z. B.:

- Druckgeschwüren
- Beingeschwüren
- venösen Geschwüren
- arteriellen Geschwüren
- diabetischen Geschwüren
- Hohlraumwunden
- Traumawunden
- Platzwunden und Abschürfungen
- postoperativen Wunden
- oberflächlichen und Verbrennungen zweiten Grades
- Hauttransplantationen

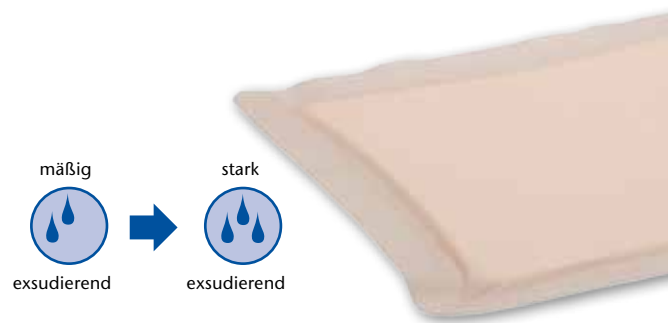

aktivmed Schaumstoffwundauflagen erhalten Sie direkt bei aktivmed oder in Ihrer Apotheke.

Schaumstoffwundauflagen – mit Hafrand

Größe	Art.-Nr.	Inhalt	PZN	AEP
7,5 x 7,5 cm	21910	10 St.	08774988	32,95 €
12,5 x 12,5 cm	21911	10 St.	08775031	59,95 €